


# Allergen App Guia

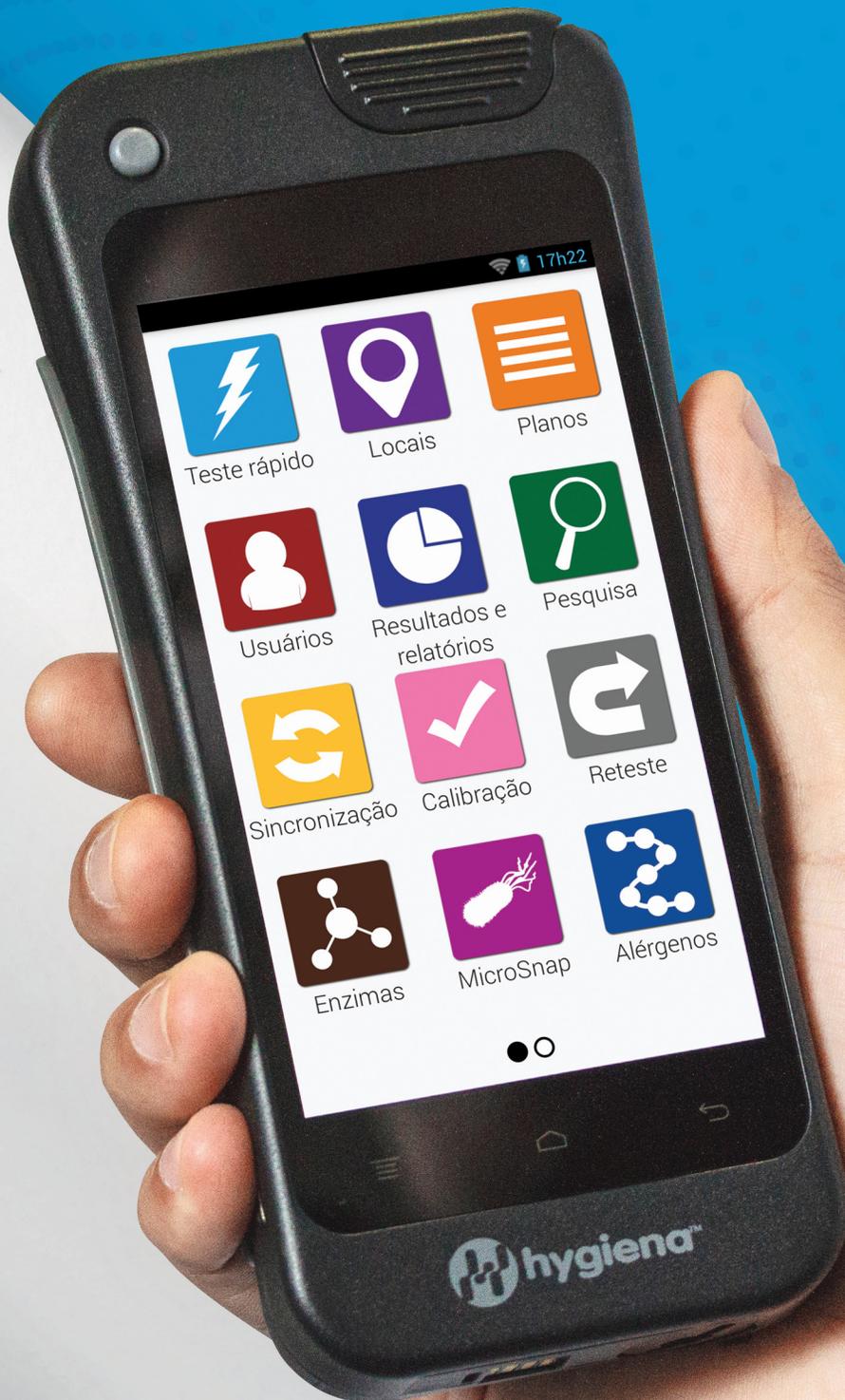

# Apresentação do novo aplicativo Allergen para EnSURE® Touch

Com o novo Allergen App, você pode obter ainda mais do seu EnSURE® Touch, mais dados de sincronização de múltiplos testes na sua SureTrend®.


## Leia o Teste Snap-Valve:



Área de amostra




Snap & Wait  
para Mudança de Cor

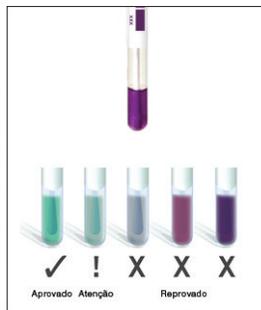


Ler Cor  
Resultados

## Ler os testes de fluxo lateral:

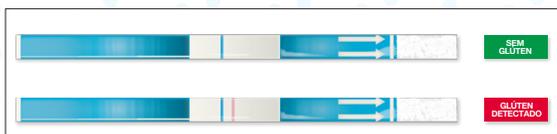


GlutenTox® Pro Sticks

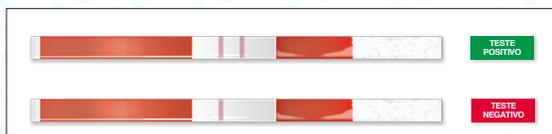

AlerTox® Sticks



AllerFlow Cassettes

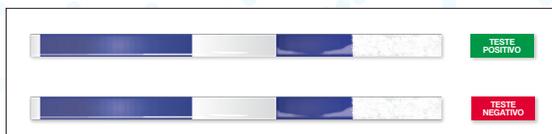

AlerTox® Sticks

## O que fazer com os resultados:



Introduza os Resultados  
(usando ET Allergens App)



Relatório sobre  
SureTrend



## Vantagens:

- Insira dados no EnSURE. Toque em sincronização automática com SureTrend. Ao introduzir os resultados no seu instrumento EnSURE Touch, os dados são sincronizados automaticamente para a nuvem, criando visibilidade para os membros da sua equipe com acesso à SureTrend;
- Una todos os dados do seu kit de teste de alergênico: AlerTox Sticks, AllerFlow Gluten, AllerSnap, GlutenTox Pro, e PRO-Clean, tudo num só local;
- Exporte os resultados dos testes de alergênicos ou construa relatórios através de SureTrend;
- Indicadores de qualidade múltipla num só instrumento: ATP, Microorganismos, Enzimas, e Alergênicos;
- Acompanhe todos os seus resultados num só local com SureTrend.

## Instruções:

Antes de tentar ativar o aplicativo Allergen, verifique duas vezes se efetuou uma atualização do software no seu EnSURE Toque enquanto está ligado ao WiFi.

- 1) Toque no ícone “Definições” na tela inicial e 2) selecione “Personalização”.
- 3) Escolha “Seleções de Produtos”.

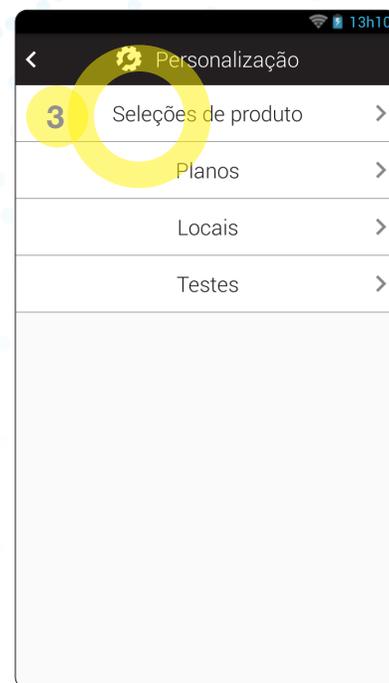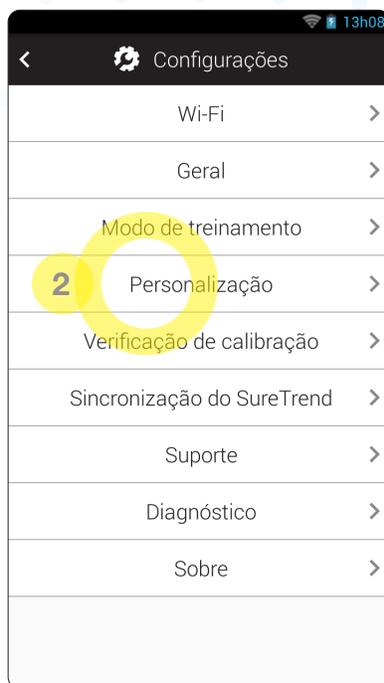


Para ativar o aplicativo Alérgenos, 1) Acione a alternativa apropriada.  
Se desejar, pode desativar quaisquer testes de alérgenos que não utilize

2) Volte para a tela inicial onde verá o aplicativo de alérgenos azul.




3) Dentro do aplicativo Alérgenos existem duas seções: Teste rápido e localizações. Utilize o Teste Rápido para realizar testes instantâneos para os quais não tenha definido locais. Os locais são as superfícies ou produtos pré-programados que serão testados.

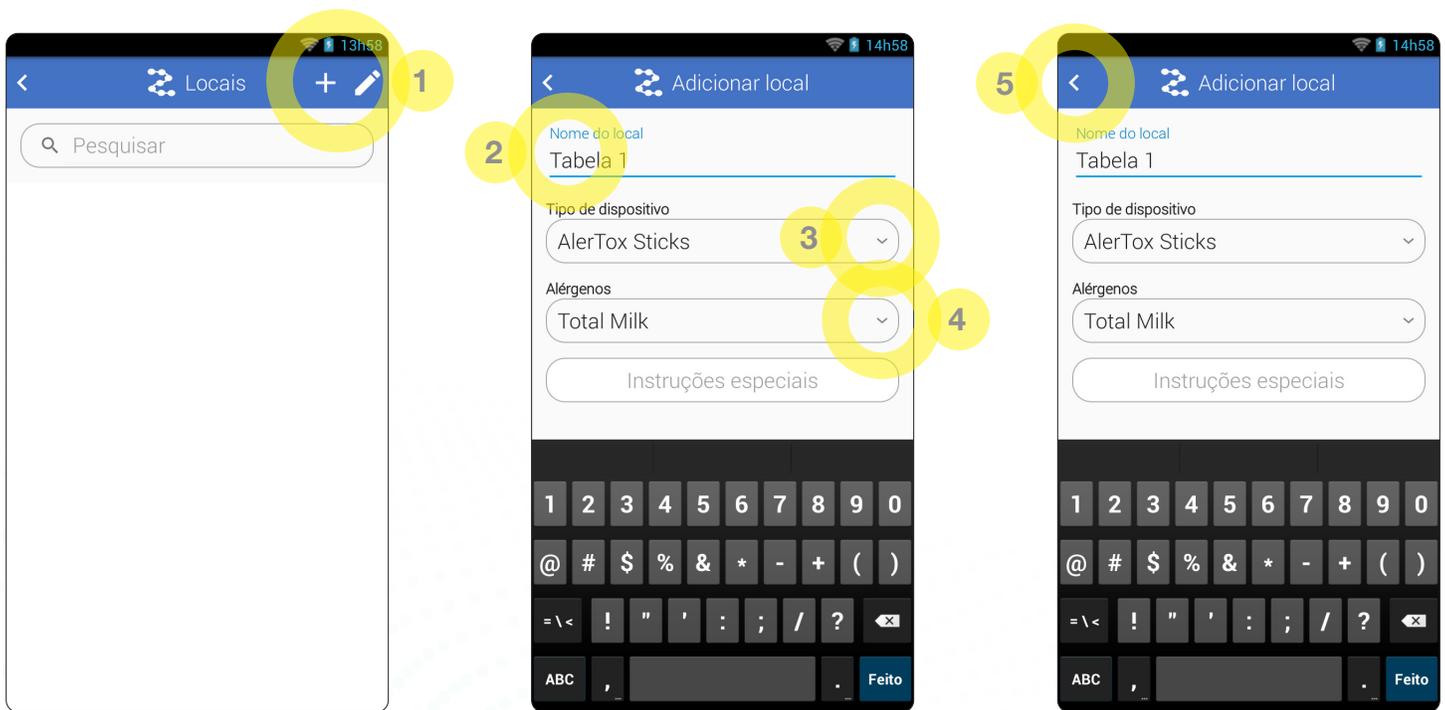

1) Para adicionar um Local, clique no sinal +. 2) Nomeie o Local que está testando, 3) escolha o Tipo de Dispositivo, e 4) defina o Alergênico que está testando. 5) Para guardar o Local, toque na seta de trás, no canto superior esquerdo.

Uma vez criado um Local, comece a testar selecionando o Local desejado. O local será pré-preenchido com o tipo de dispositivo de teste e o alergênico previamente definido para ele.

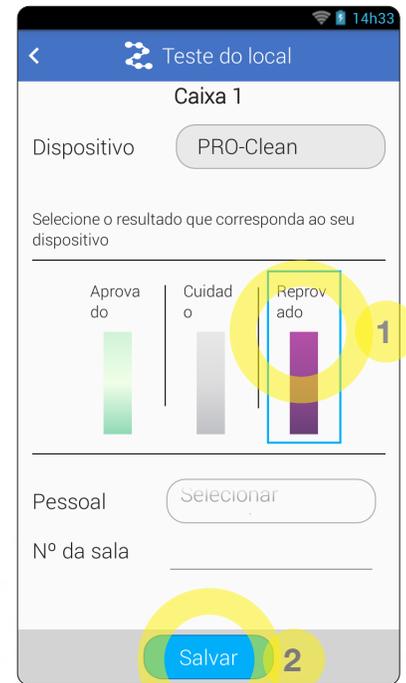

Para **AlerTox Sticks**, examine o dispositivo de teste e registre os resultados no seu EnSURE Toque escolhendo 1) Positivo, Negativo, ou Inválido. Defina o Funcionário que realizou o teste e preencha qualquer seção personalizada que tenha selecionado para relatar. 2) Clique em Salvar e Pronto. Quando ligado ao WiFi, os dados serão sincronizados através da nuvem para a sua SureTrend.

Da mesma forma para **AllerSnap**, examine o dispositivo de teste e grave os resultados no seu EnSURE Toque escolhendo 1) Aprovado, Atenção ou Reprovado. Defina o Funcionário que realizou o teste e preencha qualquer seção personalizada que tenha selecionado para relatar. 2) Clique em Salvar e Pronto. Quando ligado ao WiFi, os dados serão sincronizados através da nuvem para a sua SureTrend.

Para **PRO-Clean**, examine o dispositivo de teste e grave os resultados no seu EnSURE Toque escolhendo 1) Aprovado, Atenção ou Reprovado.

Defina o Funcionário que realizou o teste e preencha qualquer seção personalizada que tenha selecionado para relatar. 2) Clique em Salvar e Pronto. Quando ligado ao WiFi, os dados serão sincronizados através da nuvem para a sua SureTrend.

Para mais informações sobre o seu EnSURE Touch ou SureTrend, acesse: **[www.higiene.com](http://www.higiene.com)**.



[hygiena.com](http://hygiena.com) | [help.hygiena.com](http://help.hygiena.com)

📍 941 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012 | 📞 800.863.6842 US | 📞 302.695.5300 Internacional

Hygiena® and EnSURE® são marcas comerciais de Hygiena® LLC.